

## Compositi | Rifinitori Q



Frese da rifinitura Q per lavorazioni razionali e risultati di rifinitura ottimali in fase di lavorazione di compositi.

La lavorazione di compositi richiede fino a 3 livelli di rifinitura (rifinitura normale, fine ed extrafine).


Grazie all'elaborazione d'una nuova modalità di taglio, si è potuto ridurre la rifinitura a 2 livelli:

**Passaggio ❶** rifinitura Q

**Passaggio ❷** rifinitura ultrafine

**Vantaggi:**

- Risparmio di tempo grazie all'eliminazione di un passaggio.
- Risparmio di costi grazie alla riduzione di uno strumento.
- Una migliore qualità di superficie già dopo il primo livello di rifinitura, comparato con il risultato tradizionale dopo il secondo livello, grazie allo speciale taglio innovativo trasversale a misura di composito.
- Una migliore rifinitura estetica e una maggiore protezione della gengiva grazie alle punte lisce non dentate delle figure coniche H134Q e H135Q.

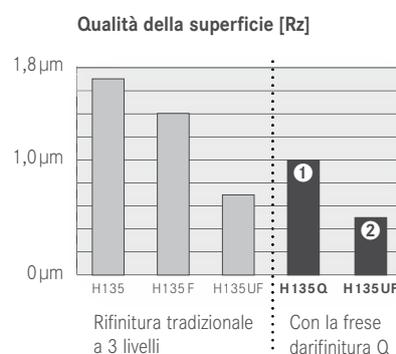

**Utilizzo:**

1. H134Q.314.014, prossimale.
2. H135Q.314.014, labiale.
3. H379Q.314.023, palatale.



**Indicazioni per l'utilizzo:**

- Per ottenere risultati ottimali lavorare a  $\omega_{opt}$  20.000 giri al min.<sup>-1</sup> ed assicurare sufficiente raffreddamento spray (min. 50 ml/min).
- Raccomandiamo la nostra ampia gamma di gommini per composito per ottenere una lucidatura perfetta.

**labiale**

-  **H134Q.314.014**
-  **H135Q.314.014**
-  **H48LQ.314.012**
-  **H48XLQ.314.012** **new**
-  **H375RQ.314.016**

**palatale**

-  **H379Q.314.018**
-  **H379Q.314.023**

**occlusale**

- con punta tagliente
-  **H246Q.314.009**
  -  **H390Q.314.018**


**interdentale**

-  **H50AQ.314.010**

**Consiglio:**  
Per la lucidatura susseguente, raccomandiamo il nostro sistema per la lucidature di compositi in due passi.



**Set 4669**  
Spazzole dentali a spirale  
- Kit introduttivo

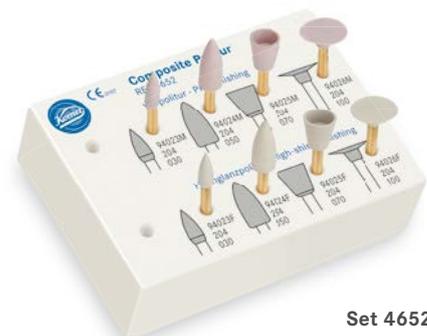

**Set 4652**  
Strumenti per la lucidatura di compositi nelle misure conosciute