


Il piacere della lucidatura

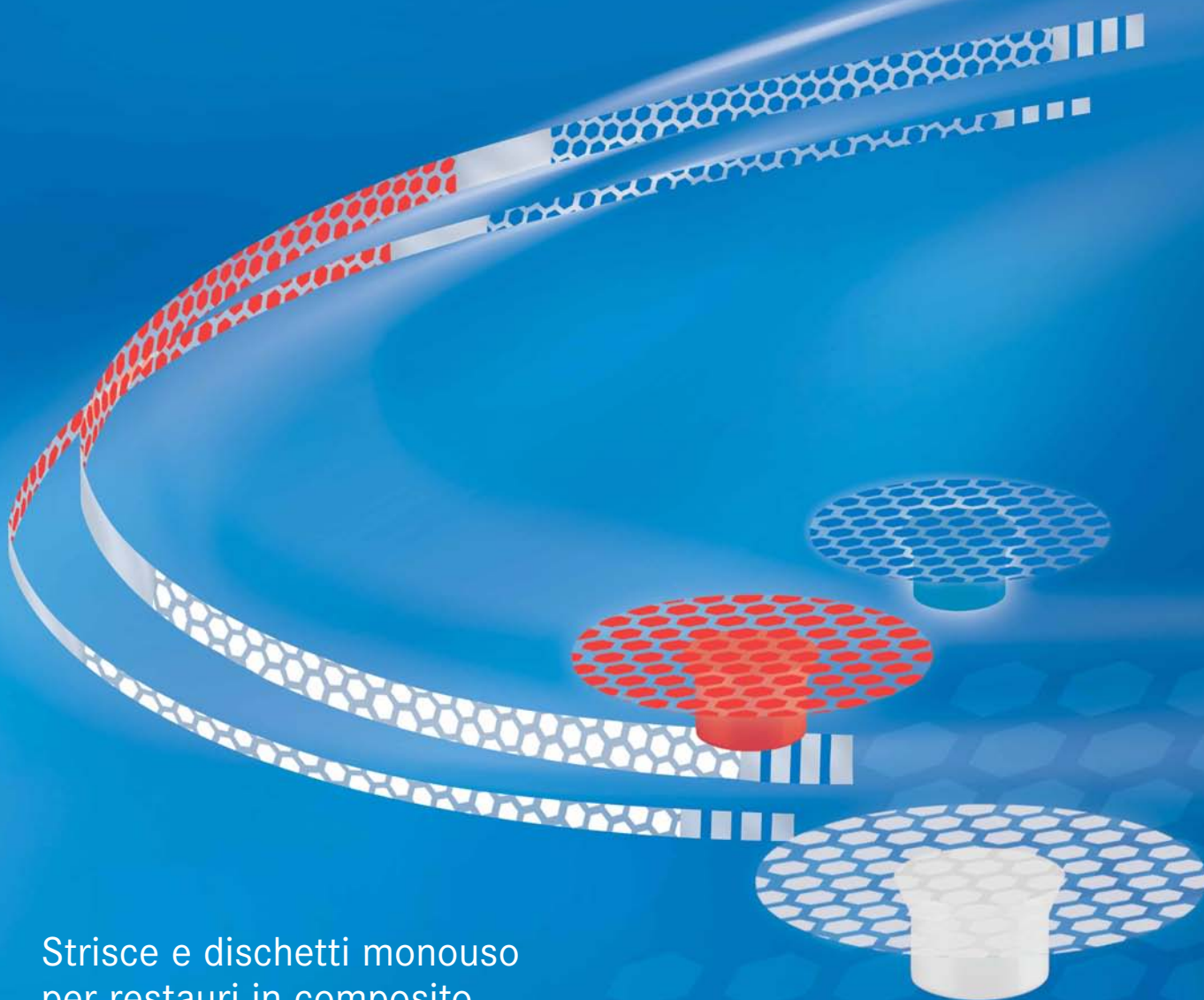

Strisce e dischetti monouso per restauri in composito

KOMET ha ideato Compo System per la lucidatura dei restauri in composito in soli tre passaggi. I dischetti sono rivestiti da entrambi i lati di piccoli esagoni abrasivi contenenti ossido di alluminio e, grazie alla loro particolare disposizione si riesce a vedere attraverso durante la rotazione. La buona visuale sul restauro durante il lavoro è pertanto garantita, come pure l'asportazione costante degli eccessi di materiale. Inoltre i dischetti lavorano sia in spinta che in trazione, per cui si verifica un notevole risparmio

di tempo. Oltre ai pratici dischetti vi impressioneranno le strisce del Sistema Compo, sui cui supporti trasparenti sono fissate tutte e tre le granulometrie in successione. In questo modo, senza bisogno di cambiare striscia, si possono effettuare tutti e tre i passaggi di lucidatura in un'unica fase di lavoro. Per il passaggio di finitura precedente alla lucidatura di dischetti e strisce vi consigliamo le frese a finire in carburo di tungsteno multilame a taglio Q.

