

Codice articolo e misure



Cognome/Nome

Ragione sociale

Indirizzo

Codice postale/Città

Cavità d'accesso

/

Quantità

Creazione del sentiero di scorrimento

/

Quantità

Preparazione meccanica

Enter length: (L21/25/31)

/

6

Quantità

Otturazione

/

Quantità

PostEndo

/

Quantità

EndoGuard

H269Q GK.314.012

5

H269Q GK.314.016

5

H269Q GK.315.016

5

EndoExplorer

EX1S.204.007

5

EX1.204.007

5

EX1L.204.007

5

EX1.310.007

5

EX2S.204.011

5

EX2.204.011

5

EX2L.204.011

5

EX2.310.011

5

Set 4664

1

EndoTracer

H1SML31.205.004

5

H1SML31.205.006

5

H1SML31.205.008

5

H1SML31.205.010

5

H1SML31.205.012

5

H1SML31.205.014

5

H1SML34.205.004

5

H1SML34.205.006

5

H1SML34.205.008

5

H1SML34.205.010

5

H1SML34.205.012

5

H1SML34.205.014

5

Set 4670

1

Apertura degli imbocchi canalari

/

Quantità

Opener

OP10L19.204.030

6

OP10L15.204.030

6

OP08L19.204.025

6

Reciprocating Opener

OPR10L19.204.030

6

OPR08L19.204.025

6

Patency Files

17521.654.006

6

17521.654.008

6

17521.654.010

6

17521.654.012

6

17521.654.015

6

Range

17521.654.S1

1

17525.654.006

6

17525.654.008

6

17525.654.010

6

17525.654.012

6

17525.654.015

6

Range

17525.654.S1

1

Mechanical preparation

Enter length: (L21/25/31)

/

6

Quantità

FQ Opener

FQ08L19.204.020

FQ Glider

FQ03L

.204.015

FQ Taper .04

FQ04L

.204.020

FQ04L

.204.025

FQ04L

.204.030

FQ04L

.204.035

FQ04L

.204.045

FQ04L

.204.055

FQ Taper .06

FQ06L

.204.020

FQ06L

.204.025

FQ06L

.204.030

Procodile Q Taper .06

PRQ6

.204.020

PRQ6

.204.025

PRQ6

.204.030

Procodile Q Taper .05

PRQ5

.204.035

PRQ5

.204.040

Procodile Q Taper .04

PRQ4

.204.045

PRQ4

.204.050

Procodile Taper .06

PROC6

.204.020

PROC6

.204.025

PROC6

.204.030

Procodile Taper .05

PROC5

.204.035

PROC5

.204.040

Procodile Taper .04

PROC4

.204.045

PROC4

.204.050

KometBioSeal

BCS1

1

DentinPost X Coated

Set 4650 (size 070)

1

Set 4651 (size 090)

1

Set 4661 (size 110)

1

TitanPost X Coated

Set 4657 (size 070)

1

Set 4658 (size 090)

1

DentinBond Evo

9972 Single-Mix capsules

1

9973 2-bottle system

1

DentinBuild Evo

9970 (A2)

1

9971 (opaque white)

1

KOMET ITALIA S.r.l. Società Unipersonale

Sede operativa:
Via Gianbattista Morgagni 36 | 37135 Verona VR | T 045 11171911
www.komet.it | info@komet.it

Sede legale:
Via Cernaia 11 | 20121 Milano MI | T 02 67076654

Trattamenti endodontici.
Istruzioni passo dopo passo.

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIAO®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Procodile Q®, R6 ReziFlow® and SHAX® are registered trademarks of Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex® and EndoPilot® are registered trademarks of Schlumberger GmbH & Co. KG

Some of the products and designations mentioned in the text are trademarked, patented or copyrighted. The absence of a special reference or the sign ® should not be interpreted as the absence of legal protection.

This publication is copyrighted. All rights, also with regard to translation, reprint and reproduction (also in the form of extracts) are reserved. No part of this publication may be reproduced or reprocessed using electronic systems in any form or by any means (photocopying, microfilm or other methods) without the written permission of the editor.

Colours and products are subject to alterations. Printing errors excepted.

Aggiornato a novembre 2023

Scopri di più

Komet Dental - Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG · Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

www.kometacademy.it

© 11/2023 - 10024487x.005

© 07/2023 - 10024487x.005



L'Endodozia con Komet.

Semplicità, sicurezza e qualità.
Gamma completa per la massima libertà di scelta.



1 Cavità d'accesso



2 Apertura degli imbocchi canalari



3 Creazione del sentiero di scorrimento



4 Preparazione meccanica



5 Otturazione



6 Ritrattamento



7 PostEndo

EndoGuard

Rimuove le sporgenze dentinali e protegge la base della della camera pulpare con la sua punta liscia non tagliente.

(20.000 rpm
) 160.000 rpm



EndoTracer

La forma minuta con il collo lungo e sottile consente una visione migliore una volta inserito lo strumento nella cavità d'accesso.

Ideale per la preparazione degli istmi.

(1.500 rpm
) 20.000 rpm



FQ Opener

Apri l'imbocco canale cre-ando un accesso ideale e cen-trato. Grazie alle sue piccole dimensioni e al trattamento termico, l'FQ Opener consente di accedere anche ai canali stretti o difficili da raggiun-gere, in particolare l'MB2.


(300 rpm
) 500 rpm
Torque: 2,4 Ncm



Opener

Utilizzato nel terzo coronale, l'Opener rimuove i triangoli di dentina e i tessuti infetti sin dall'inizio del trattamento endodontico.


(300 rpm
) 500 rpm
Torque: 2,8 Ncm

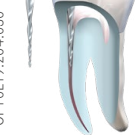

Reciprocating Opener

L'alternativa reciprocante agli opener rotanti.

(300 rpm
) 500 rpm
Torque: 0,8 Ncm

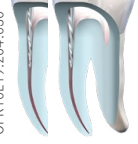

FQ Glider

Riduce il rischio di false strade nel canale e altri trattamenti indesiderati, assicurando al contempo che tutti i seguenti file per sagomatura lavorino in maniera corretta e sicura.

(300 rpm
) 500 rpm
Torque: 0,8 Ncm



Patency-File

Acciaio temprato termica-mente per un sondaggio manuale più efficace nei canali calcificati.

(300 rpm
) 500 rpm
Torque: 1,8 Ncm



EndoExplorer

Strumento piccolo e affusolato per trattamenti minimamente invasivi, permette un controllo ottimale nella cavità d'accesso primaria e secondaria.

Ideale per lavorare sotto il microscopio.

(2.000 rpm
) 40.000 rpm



FQ Files

File rotanti con trattamento termico Q e conicità interna variabile: flessibilità senza compromessi e efficacia di taglio anche in canali calcificati.

(300 rpm
) 500 rpm
Torque: 1,8 Ncm
020/.04 - 035/.04
045/.04 - 055/.04
020/.06 - 030/.06
Torque: 2,4 Ncm

FQ04L25.204.025
FQ04L25.204.025



Procodile

Agile e con grandi capacità di taglio.

Sistema di file reciprocanti con conicità interna variabile: veloci e sicuri.

STERILE



PRO04L25.204.025



Procodile Q

L'evoluzione della flessibilità.

Sistema di file reciprocanti con trattamento termico Q e conicità interna variabile: flessibili ed efficaci.

STERILE



PRO04L25.204.025



KometBioSeal

Cemento bioceramico.

Materiale per otturazioni radicolari a base di silicato di calcio con effetto battericida e un'eccellente biocompatibilità.



Endo ReStart


Sistema di file NiTi con punta lavorante per un efficace ritrattamento con solamente 2 strumenti.

(300 rpm
) 500 rpm
Torque: 1,8 Ncm



DentinPost X Coated TitanPost X Coated

Perni corti in composito rinforzato con fibra di vetro o con titanio per ridurre al minimo l'indebolimento della radice.

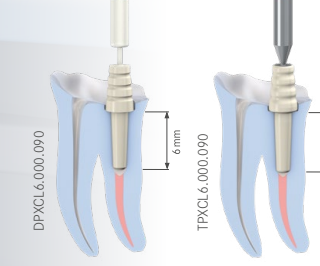

DentinBuild Evo DentinBond Evo

Sistema composito a doppia polime-rizzazione per cementazione del perno radicolare e ricostruzione del moncone.



9970 (A2)
9971 (opaque white)



9973