



Komet **EnDrive.**


Il motore all'avanguardia.

Progettato per le esigenze dei clienti.



Contenuto.

- 4 | 5 Komet EnDrive.
- 6 | 7 Efficienza senza compromessi.
- 8 | 9 Semplicità su misura.
- 10 | 11 Sicurezza garantita.
- 12 | 13 Ottimizza la perfezione.
- 14 | 15 Eccellente da solo.
Ancora meglio in squadra.
- 16 | 17 Progettato per soddisfare
le tue esigenze.

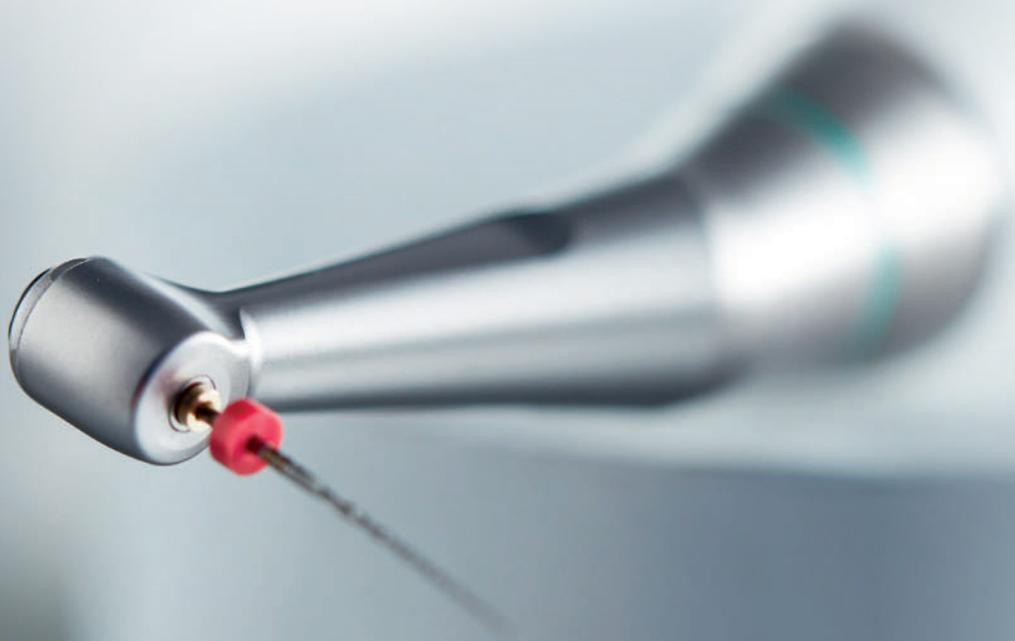

Komet **EnDrive**.

Porta il tuo studio a un livello superiore - efficiente, semplice e sicuro.

Il nostro nuovo motore endodontico a batteria con localizzatore apicale integrato è stato progettato appositamente per soddisfare le esigenze attuali degli studi dentistici. Rende il tuo lavoro quotidiano efficiente, semplice e sicuro.



Efficiente:

L'EnDrive aiuta a risparmiare tempo, fatica e costi grazie a processi efficienti: un investimento che si ripaga ogni giorno nello studio.



Semplice:

Rende il tuo lavoro più facile grazie al suo funzionamento intuitivo e alla massima flessibilità. In genere, basta un breve periodo di formazione, per acquisire la padronanza di questa tecnologia.



Sicuro:

La nostra consulenza passo dopo passo e molte nuove funzionalità riducono al minimo gli errori di applicazione, i ritardi e le interruzioni. Che tu sia nuovo nei trattamenti endodontici o stia passando da un altro motore endodontico all'EnDrive, molte nuove caratteristiche e la nostra consulenza qualificata ti aiuteranno a ottimizzare i tuoi trattamenti fin da subito.

Porta il tuo studio al livello successivo in modo efficiente, semplice e sicuro.



Efficienza senza compromessi.

EnDrive conviene – giorno dopo giorno.

Indipendentemente da quanti trattamenti endodontici esegui, da come lavoravi fino ad ora e dalle specifiche esigenze del tuo motore endodontico: il nostro nuovo motore endo con localizzatore apicale integrato conviene giorno dopo giorno. Sfrutta le sue funzionalità avanzate che riducono il tuo carico di lavoro. Scopri

come puoi risparmiare tempo grazie ai vantaggi dell'EnDrive. Riduci fatica e tempo: un risparmio concreto che fa la differenza nella pratica di ogni giorno.

Aggiornamenti senza pensieri.

Non hai bisogno di assistenza per usare l'EnDrive. Non ci sarà più bisogno di un intervento esterno per tenere il tuo motore sempre all'avanguardia. L'EnDrive si occupa degli aggiornamenti software necessari in modo autonomo con un semplice tocco di un pulsante. Lo fa automaticamente via WLAN, in modo semplice, rapido e autonomo. Non sarà più necessario chiamare l'assistenza in caso di aggiornamenti non riusciti. E neanche i tuoi collaboratori dovranno più occuparsene. Non sono sempre gli aggiornamenti migliori quelli che non noti, eccetto che per il fatto che sono stati un successo?






Concentrati su ciò che conta davvero.

Ciò che conta davvero è il trattamento. Non dovrai preoccuparti che le batterie siano sufficientemente cariche o di cavi che intralciano il trattamento. Concentrati solo sul tuo lavoro. L'unità principale e il manopolo del motore EnDrive sono senza fili e a batteria. Una carica completa della batteria è sufficiente per una giornata di lavoro normale e si completa in 1,5 - 2,5 ore. Se necessario, puoi anche caricare le batterie dell'EnDrive durante il trattamento. Il tuo EnDrive è sempre pronto all'uso, riducendo significativamente i ritardi o le interruzioni forzate.

Contrangolo piccolo, efficacia grande

Pensi e agisci con lungimiranza – e lo fa anche il tuo EnDrive. La sua funzione di calibrazione integrata garantisce una perfetta trasmissione della coppia. La calibrazione è rapida, ma il beneficio è duraturo. Il tuo EnDrive lavora sempre con prestazioni ottimali. Il contrangolo è anche elettricamente isolato e non è necessario un ulteriore rivestimento in silicone, evitando possibili misurazioni errate in caso di contatto involontario nella cavità orale. Più efficienza, meno interruzioni e pause nel trattamento.

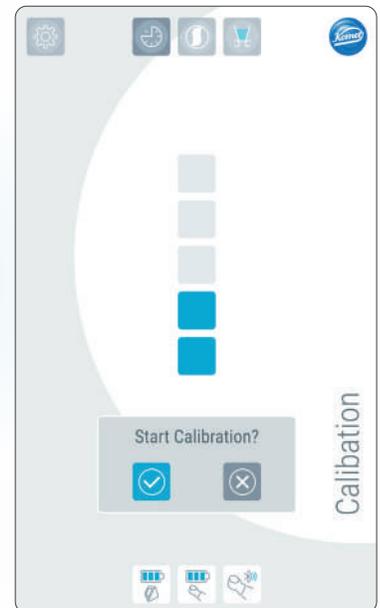

Semplicità su misura.

EnDrive rende semplici i trattamenti complessi.

Tutti i dentisti eseguono i trattamenti endodontici seguendo le proprie abitudini. Quindi sentiti libero di svolgere i tuoi esattamente come sei abituato. Nel modo più semplice e comodo possibile. EnDrive è stato progettato per permettere agli utenti di lavorare esattamente come sono soliti fare, con tutti i vantaggi della tecnologia più avanzata. I trattamenti endodontici sono già complessi di per sé, quindi perché non renderli il più semplici possibile grazie alle possibilità tecniche di oggi? Il tuo EnDrive non solo si adatta perfettamente al tuo lavoro, ma soprattutto soddisfa i tuoi desideri e le tue esigenze.

Più che semplice, è intuitivo.

EnDrive ti rende perfetto anche senza molta pratica. La struttura del menu è stata progettata con cura per permettere anche agli utenti meno esperti di orientarsi dopo un breve periodo di formazione. Non c'è motivo di esitare: ti accompagneremo con una consulenza qualificata passo dopo passo, per tutto il tempo necessario e fino a quando ti sentirai completamente sicuro. Apprezzerai i vantaggi del display a colori e touch da 7 pollici, chiaro e intuitivo, che puoi utilizzare semplicemente con un tocco. Non solo troverai subito ciò che cerchi, ma grazie alla struttura ordinata e alla panoramica completa, avrai sempre tutto sotto controllo in un attimo. File preferiti, sequenze, progressi del trattamento con marcature colorate della profondità: tutte le informazioni di cui hai bisogno, sempre a portata di mano. Regola le impostazioni, passa da un'opzione all'altra – tutto con un semplice tocco. Un grande sollievo e un risparmio di tempo, soprattutto quando serve agire rapidamente. Inoltre, meno pulsanti significa minore rischio di contaminazione. Installa il dispositivo, inizia subito e goditi i benefici a lungo termine.



Misurazione apicale



Connessione
Bluetooth attiva



L'efficienza è una questione di abitudine.

Ognuno ha preferenze ed esigenze diverse quando si tratta di trattamenti endodontici. L'EnDrive le soddisfa quasi tutte. Il suo manipolo ergonomico è progettato sia per utenti destrorsi che mancini, ideale per lavori di precisione e per un uso mobile. Il display può essere utilizzato sia in verticale che in orizzontale, così da essere sempre facilmente leggibile.

Rotante o reciprocante non è più una questione di scelta, ma di abitudine. L'EnDrive può fare entrambe le cose, seguendo semplicemente le tue istruzioni. Inoltre, la sua ampia libreria di file contiene quasi tutti i file endodontici disponibili sul mercato, con valori preimpostati come velocità o coppia. Usa senza problemi le tue scorte di file o continua a utilizzare quelli che preferisci!

Compatto, comodo e senza fili, se necessario.

EnDrive richiede pochissima manutenzione per permetterti di fare meglio il tuo lavoro. Grazie alle sue dimensioni compatte, all'uso sia in formato verticale che orizzontale e al suo peso leggero, può essere utilizzato con estrema flessibilità e si adatta a quasi ogni vassoio portastrumenti. Il manipolo ergonomico può essere comodamente agganciato al supporto magnetico dell'unità principale, consentendoti di trasportare facilmente l'intero sistema da una stanza all'altra con una sola mano.

Goditi la totale libertà nel lavoro, praticamente senza cavi che si aggrovigliano e con pochi pulsanti da premere.

Sicurezza garantita.

Nessun compromesso quando si tratta di sicurezza.

Quando si tratta di sicurezza, non affidarti solo al tuo istinto, ma alla sicurezza firmata Komet. Riduci al minimo la frattura dei file, le misurazioni errate e altri ritardi grazie alla tecnologia più avanzata. Diminuisce il rischio di contaminazione, soprattutto dove i requisiti igienici sono particolarmente elevati. Riduci il rischio di una preparazione eccessiva, dove ogni millimetro conta. L'EnDrive ti offre il miglior supporto possibile.

Lavoro di precisione, proprio come lo vuoi.

Per offrire performance di alto livello e lavoro di precisione, hai bisogno degli strumenti migliori. Puoi contare sul localizzatore apicale brevettato, che ti permette di sapere sempre esattamente dove ti trovi. Il nostro localizzatore apicale è già integrato nell'EnDrive e fornisce misurazioni ad alta precisione in tempo reale, mentre tu continui a concentrarti sul tuo lavoro. Hai un controllo preciso sulla profondità della preparazione in ogni momento. Puoi anche continuare a usare i tuoi file manuali, semplicemente utilizzando il corrispondente morsetto per file e il cavo separato. Questo riduce notevolmente il rischio di una preparazione eccessiva.





Condizioni di lavoro perfette nei minimi dettagli.

Migliora le tue condizioni di lavoro con le nostre funzionalità endodontiche avanzate. Ad esempio, il contrangolo dell'EnDrive è il nostro più piccolo fino ad oggi e offre la miglior visibilità dell'area di lavoro. Inoltre, può essere ruotato di 360 gradi, permettendoti di adattarlo alle tue preferenze di impugnatura in qualsiasi momento. Il supporto magnetico sull'unità principale è una novità. Grazie a questo, puoi agganciare il manipolo al motore in un attimo se hai bisogno di muoverti rapidamente o se non c'è una mano disponibile. Inoltre, riduce il rischio di contaminazione e ti permette di trasportare l'intero sistema con una sola mano.



Lavorare in completa sicurezza, anche vicino al limite.

Ogni ritardo porta a una costosa perdita di tempo. Con le funzionalità di sicurezza dell'EnDrive, i ritardi possono essere ridotti al minimo. Il tuo manipolo è dotato di un nuovo anello LED che si accende, in aggiunta all'avviso sul display dell'unità principale, insieme a un segnale acustico che suona prima di raggiungere un valore di coppia critico. Questo ti consente di lavorare con precisione all'interno dell'intervallo limite, riducendo al minimo il rischio di frattura del file. Le pause forzate durante il trattamento possono essere ridotte grazie alle funzioni di auto-stop e auto-reverse dell'EnDrive. A seconda delle tue necessità, il file si ferma quando necessario o ruota liberamente in direzione opposta prima che si verifichi la frattura del file, indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando file rotanti o reciprocanti.



Ottimizza la perfezione.

Con i file FQ e Procodile Q abbinati.

Utilizza i dettagli più fini per ottimizzare ulteriormente i benefici del tuo EnDrive con i file giusti. Con il nostro sistema di file rotanti FQ e il sistema di file reciprocanti Procodile Q, puoi aggiungere un altro prodotto Komet al tuo sistema endodontico, rendendo i tuoi trattamenti semplici, efficienti e sicuri.

Alta efficienza e flessibilità.

Riduci ulteriormente il rischio di frattura del file e aumenta l'efficienza dei tuoi trattamenti, massimizzando la sicurezza con i nostri sistemi di file FQ e Procodile Q. Entrambi i file sono trattati termicamente, il che significa che entrambi i sistemi, sia rotanti che reciprocanti, sono particolarmente flessibili, possono essere precurvati con facilità e rimuovono il tessuto infetto con un'efficienza senza pari. Inoltre, presentano una conicità variabile interna: il diametro diminuisce verso il gambo mentre la conicità rimane la stessa all'esterno. Ciò significa che ogni file può

essere perfettamente adattato alle tue esigenze individuali e che i detriti vengono rimossi nel miglior modo possibile grazie all'ampio spazio per i trucioli. Grazie al trattamento termico e alla conicità interna variabile, i file seguono anche i canali radicolari fortemente curvati, assicurando così un trattamento di successo, anche in condizioni anatomiche difficili.

Eccellente da solo. Ancora meglio in squadra.

EnPack ed EnFill – il complemento ideale per otturazioni radicolari semplici, convenienti e sicure.

EnPack.

Con il nostro dispositivo di otturazione per otturazione verticale a caldo del terzo apicale, puoi completare il trattamento endodontico in modo efficiente, confortevole e sicuro.

Sei sempre pronto per l'azione, puoi iniziare subito e lavorare in modo efficiente senza interruzioni. La punta riscaldante si scalda in soli 0,2 secondi. Non perdi tempo prezioso e rimani nel flusso di lavoro.

Il funzionamento semplice plug-and-play, il display facilmente leggibile in qualsiasi posizione e una potente batteria ti assicurano che dovrai preoccuparti solo del tuo paziente e non della tecnologia.

EnPack rende il lavoro pulito e preciso particolarmente facile.

Può essere utilizzato universalmente, sia da chi preferisce la preparazione manuale che in combinazione con qualsiasi motore endodontico. Con un diametro di 0,35 mm,

le punte riscaldanti offrono una visione libera dell'area di lavoro. Grazie al basso peso e al design ergonomico di EnPack, puoi lavorare senza affaticarti.

La separazione precisa del master point è facile con la punta riscaldante, anche con otturazioni a freddo - senza sbavature e senza rischiare di estrarre nuovamente la guttaperca.

Il riscaldamento rapido nel canale radicolare assicura la massima sicurezza per il paziente e un risultato perfetto e omogeneo.





EnFill.

Con il nostro dispositivo di otturazione per otturazione verticale a caldo del centrale e del terzo coronale del canale radicolare, puoi completare il trattamento endodontico in modo efficiente, confortevole e sicuro. Grazie alla potente batteria ricaricabile e al breve tempo di riscaldamento di soli 15 secondi, sarai pronto all'uso in pochissimo tempo e potrai eseguire l'otturazione senza interruzioni o ritardi.

Le sei punte per iniezione disponibili possono essere perfettamente adattate alle esigenze del canale radicolare e alle tue preferenze di impugnatura, poiché

possono ruotare di 360°. Sono così sottili che avrai sempre una visione libera dell'area di lavoro, permettendoti di riempire il canale in modo sicuro e preciso fino a 3 mm prima dell'apice.

Funzionamento intuitivo, risposta rapida e design ottimizzato ti fanno risparmiare tempo prezioso durante ogni trattamento endodontico.

L'EnFill può essere utilizzato sia per la lavorazione manuale che in combinazione con qualsiasi motore endodontico.

Il manico leggero ed ergonomico ti consente di avere pieno controllo sul volume di riempimento e sulla velocità di flusso, così da poter seguire il tuo flusso di lavoro. Che lo usi da solo o con l'EnPack come partner ideale, con EnFill otterrai anche i benefici da tutto il lavoro impegnativo che hai svolto durante la preparazione del canale radicolare.



Progettato per soddisfare le tue esigenze.

Tutto questo è in EnDrive.

Contenuto della confezione:

Ogni EnDrive è fornito con tutto il necessario per una preparazione radicolare di successo, ad esempio una pinza per labbra e una pinza per file per la misurazione della lunghezza con file meccanici. Non inclusi nel contenuto della confezione, ma sempre a tua disposizione: la nostra consulenza qualificata passo dopo passo, che ti accompagnerà finché non ti sentirai completamente sicuro.

	Contenuto della confezione
1	Unità principale EnDrive
2	Manipolo EnDrive
3	Contrangolo EnDrive
4	Pinza per file EnDrive
5	Pinza per labbra EnDrive
6	Cavo per misurazione dell'apice EnDrive
7	Cavo per manipolo EnDrive
8	Cavo di ricarica con spine EU, UK, US, AU
9	Adattatore di assistenza
	Inserti
	Istruzioni per l'uso






Pezzi di ricambio e accessori:

Hai bisogno di un pezzo di ricambio o desideri un accessorio aggiuntivo per i tuoi trattamenti endodontici? Nessun problema. Con il nostro servizio Komet, riceverai immediatamente ciò di cui hai bisogno - originale e di qualità superiore.

REF	Pezzi di ricambio / Accessori
⑥ ED02	Cavo di rilevazione dell'apice EnDrive
④ ED03	Pinza per file EnDrive
⑤ ED04	Pinza per labbra EnDrive
③ ED05	Contrangolo EnDrive
② ED06	Cavo per manipo EnDrive
⑧ ED07	Adattatore AC/DC EnDrive

L'endodonzia ha molte esigenze.

Ecco perché hai uno spazio per i tuoi appunti proprio qui.

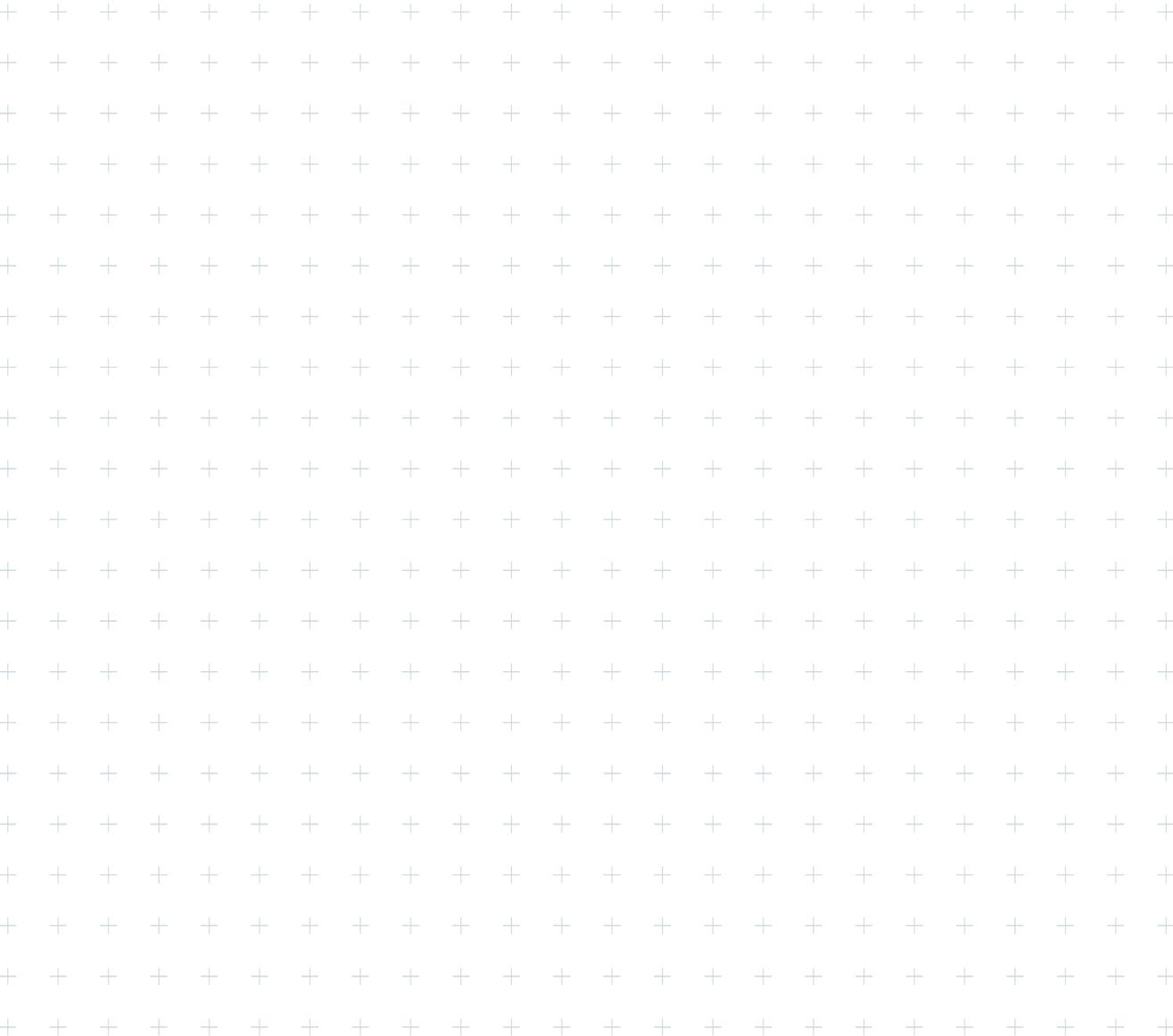





Komet Italia S.r.l.
Società Unipersonale

Sede operativa:

Via Gianbattista Morgagni, 36
37135 Verona (VR)
T 045 11171911
www.komet.it | info@komet.it

Sede legale:

Via Cernaia 11
20121 Milano (MI)
T 02 67076654

Centro corsi Komet Academy Italia:

Via Belgio, 12
37135 Verona (VR)
T 045 11171911
www.komet.it | corsi@komet.it



www.komet.it



/kometitalia1560

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIA0®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, KometBioSeal®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Procodile Q® et SHAX® are registered trademarks of Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex® and EndoPilot® are registered trademarks of Schlumbohm GmbH & Co. KG

Some of the products and designations mentioned in the text are trademarked, patented or copyrighted. The absence of a special reference or the sign ® should not be interpreted as the absence of legal protection.

This publication is copyrighted. All rights, also with regard to translation, reprint and reproduction (also in the form of extracts) are reserved. No part of this publication may be reproduced or reprocessed using electronic systems in any form or by any means (photocopying, microfilm or other methods) without the written permission of the editor.

Colours and products are subject to alterations.
Printing errors excepted.

Dicembre 2024